


# Hémoculture - Guide des bonnes pratiques

Ne pas étiqueter cette zone

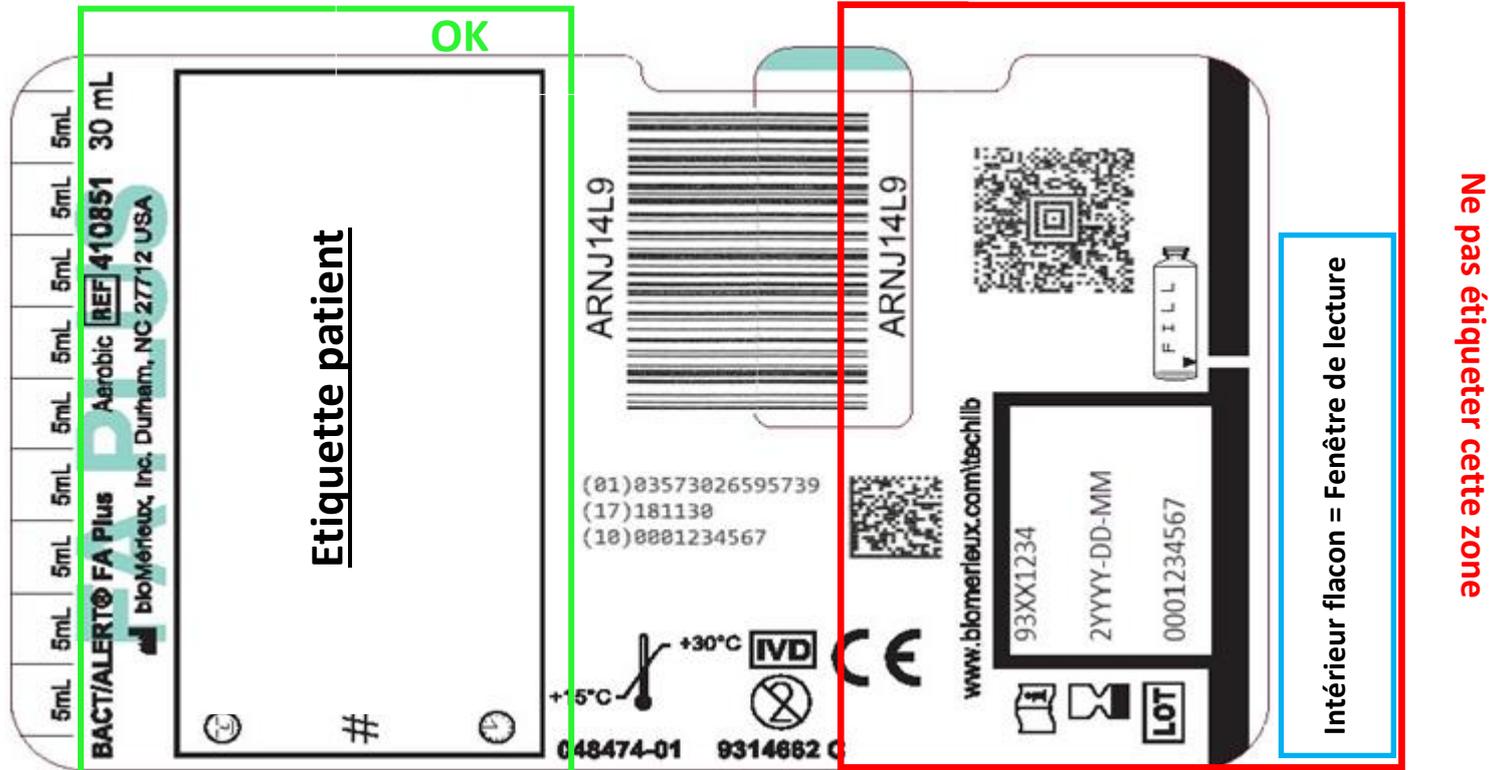

Ne pas étiqueter cette zone

- **Par épisode septique =**  
Prélèvement unique.  
Volume optimal\* de 60 mL de sang total  
Soit 6 flacons bien remplis.  
Si urgence : 6 flacons  
Si pas d'urgence : 4 + 2 flacons
- **Si Dispositif intra-vasculaire (DIV):**  
1 paire en périphérie + 1 paire sur DIV  
(écart < 10 min, sans purge, préciser site)  
\*Volume pédiatrique : selon poids  
(cf « Les actes de prélèvement » sur manuel prélèvement)

Remplir le flacon  
**vert et orange**  
jusqu'au repère  
(trait blanc)

**Fenêtre de lecture :**  
NE PAS MASQUER PAR  
UNE ETIQUETTE

# Hémoculture - Guide des bonnes pratiques



**1**

Flacon **aérobic** et **anaérobic** :  
Utiliser le repère visuel de remplissage.  
Flacon **pédiatrique**, avant le prélèvement :

- Marquer un trait pour la limite du volume sanguin à prélever
- Vérifier : date péremption, couleur culot (si jaune = éliminer le flacon).



**2**

Retirer la capsule de protection, désinfecter les bouchons avec une compresse imbibée d'antiseptique alcoolique et laisser sécher 30-60 secondes.




**3**

Friction des mains.



**4**

Désinfecter la zone de prélèvement (antiseptie avec détersion préalable)  
**NE PLUS PALPER LA VEINE APRES.**

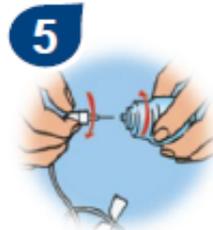

**5**

VISSER à fond l'adaptateur BacT/ALERT au dispositif de prélèvement.



**6**

Pratiquer la ponction veineuse à l'aide de l'aiguille (Port de gants).



**7**

Placer l'adaptateur sur le flacon aérobie en pressant le long du flacon.  
Puis remplir l'anaérobie.  
Si tubes de sang à prélever : les réaliser après les flacons.



**8**

Retirer le dispositif.  
Désinfecter à nouveau les bouchons et mélanger 2/3 fois.

**9**

Identifier les flacons.  
Coller les étiquettes sur le cadre prévu à cet effet.  
Ne pas écrire sur le fond des flacons.  
Préciser date, heure et site de prélèvement sur le bon.  
Acheminer à T°C ambiante le plus rapidement au laboratoire, avec le bon, dans un sachet de transport séparé des autres prélèvements.